

Инструкция



Насадка "Грибок"

Общий тонизирующий массаж



Насадка "Гребешок"

Улучшение трофики кожи головы,
предотвращает выпадение волос



Насадка "Лепесток"

Деликатный уход за кожей



Импульсный массажер sertsa® BP-9001
три насадки в комплекте

Содержание

Введение _____	1
Способы воздействия _____	1
Показания _____	2
Правила работы _____	2
Меры предосторожности _____	3
Техника проведения процедуры _____	4
Процедуры на области лица и декольте _____	5
Воздействие на волосистую часть головы _____	6
Профилактика целлюлита _____	6
Воздействие на руки _____	7
Наименование компонентов прибора _____	8
Проблема и решение _____	8
Технические характеристики _____	9
Список аксессуаров _____	9


Технические характеристики

- 1. Источник питания: 220V/50Hz
- 2. Мощность: 20W

Список аксессуаров

- 1. Стекланные насадки 3
- 2. Инструкция 1

Наименование компонентов прибора

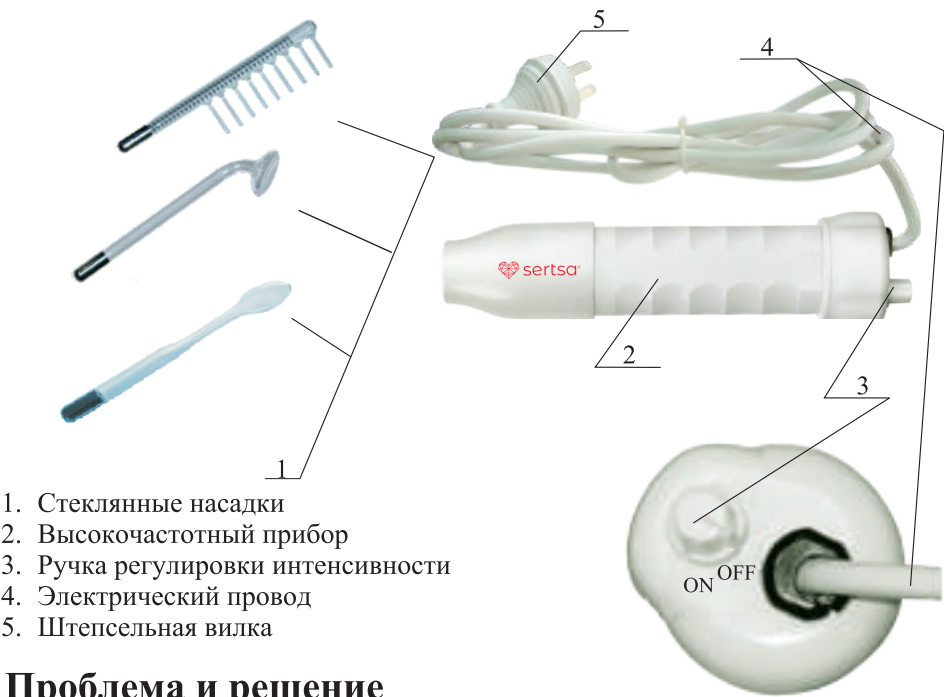

Проблема и решение

Возможная проблема	Решение
Прибор включен, но не работает	1. Проверьте, подключен ли прибор к электросети
	2. Проверьте, есть ли напряжение в электрической сети
	3. Осмотрите стеклянную насадку на наличие повреждений или замените ее
Слабая работа	1. Проверьте напряжение источника питания
	2. Проверьте целостность стеклянной насадки или замените ее
	3. Проверьте, работает ли ручка регулировки интенсивности

Если проблема не решается самостоятельно либо вы обнаружили техническую неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр для квалифицированной диагностики и ремонта устройства. В гарантийный ремонт принимается только оборудование без следов механических повреждений, в противном случае производитель не будет нести ответственность за любые вытекающие из этого последствия.

Введение

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового вида портативных высокочастотных устройств для массажа. Прибор не является медицинским оборудованием и используется в профилактических целях.

Вы приобрели высококачественную продукцию торговой марки sertsa® – импульсный массажер sertsa® BP-9001. Мы предлагаем внимательно прочитать инструкцию, чтобы знать, как правильно его использовать. Теперь вы можете проводить процедуры дома, это не отнимет у вас много времени и не потребует профессионального обучения. Весь процесс можно эффективно проводить в уютной атмосфере, что поможет быстрее восстановить сияние кожи, здоровье и красоту.

Метод электроимпульсного высокочастотного массажа обеспечивает качественный уход за кожей, предотвращает появление и развитие многих косметических проблем.

Принцип работы основан на воздействии на ткани слабыми импульсными токами высокой частоты и напряжения. Импульсные токи передаются на кожу через герметичную пустотелую стеклянную насадку, заполненную инертным газом под низким давлением. При использовании устройства ток воздействует на организм путем искрового разряда через воздушный зазор между стеклянной насадкой и кожей.

Способы воздействия

Два варианта использования импульсного массажера в домашних условиях:

1. Контактный ("тихий разряд")

Вакуумная насадка массажера оказывает воздействие на конкретный участок кожи, находясь с ней в непосредственном контакте. Процедуры в режиме "тихого разряда" нормализуют секрецию сальных желез, повышают упругость и эластичность кожи, препятствуют развитию морщин.

2. Бесконтактный ("искровой разряд")

Массажная насадка находится на расстоянии в 1-4 мм от кожного покрова. При удалении насадки от кожи формируется искровой заряд, воздух вблизи массажера наполняется озоном, а на обрабатываемом участке кожи ощущается легкое покалывание.

Желаемый эффект в обоих случаях достигается в среднем за 10-12 процедур.

Показания

Лицо

- ❖ Проблемная кожа, акне и воспаление
- ❖ Снижение тургора, дряблость и морщины
- ❖ Бледная тусклая кожа
- ❖ Жирная кожа с расширенными порами

Кожа головы

- ❖ Повышенная функция сальных желез и нарушение обменных процессов в коже головы, расширение пор и увеличенное количество кожного сала
- ❖ Перхоть, выпадение волос

Тело


- ❖ Целлюлит

Правила работы

1. Проверьте, соответствует ли напряжение вашей электросети требованиям устройства, а затем вставьте штепсельную вилку в розетку.
2. Проверьте, установлена ли ручка регулировки интенсивности в положение «OFF».
3. Вставьте насадку, которая вам нужна, в разъём.
4. Поверните ручку в положение «ON» и отрегулируйте выходную интенсивность от низкой до высокой, в зависимости от вашей чувствительности.
5. Завершите процедуру, поверните ручку обратно в положение «OFF» и вытащите вилку из розетки. Очистите все аксессуары.

Воздействие на руки

Процедура проводится насадкой «Грибок» по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью. Воздействие осуществляется плавными круговыми движениями по спирали от пальцев к области плеча. Типовые схемы даны на рисунке.

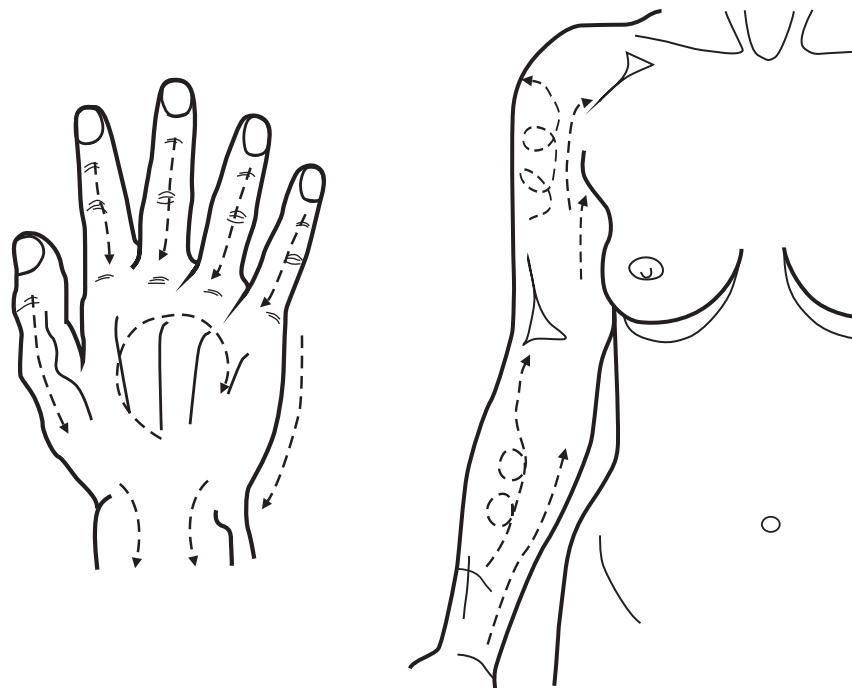


Воздействие на волосистую часть головы

(Стимуляция роста волос)

1. Волосы должны быть чистыми и сухими. Из волос необходимо удалить заколки и хорошо расчесать. Воздействие проводится насадкой «Гребешок» по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью.
2. Насадку необходимо плавно и медленно передвигать от лба к затылку, а если волосы короткие, то допускается движение и в обратном направлении. Общее время процедуры может составлять 10-15 минут.
3. Очень эффективным является по окончании воздействия втирать в кожу головы специальные сыворотки или сделать маску для волос.
4. Процедуры необходимо проводить ежедневно. Курс массажа составляет 20-30 процедур. Курс можно повторять 3-4 раза в год.

Профилактика целлюлита

Воздействие проводится насадкой «Грибок» по контактной методике на участке с наличием целлюлита и расширенными поверхностными кожными капиллярами. Интенсивность воздействия выбирается от средней до высокой. После процедуры рекомендуется нанести антицеллюлитный гель или крем.

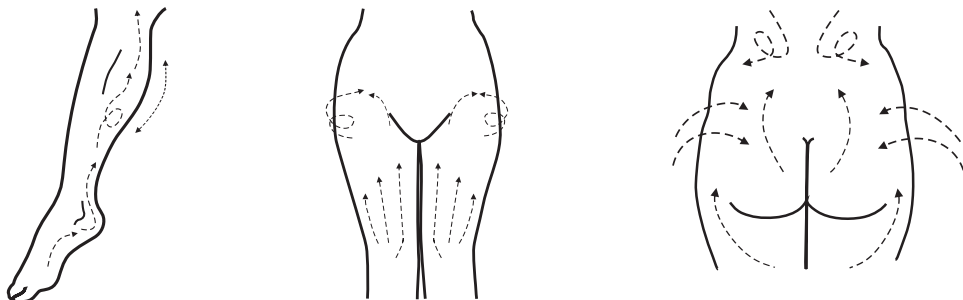

Меры предосторожности

1. Внимательно изучите инструкцию перед использованием.
2. Запрещается использовать в помещениях с повышенной влажностью, ванных комнатах и бассейнах.
3. Запрещается использовать без насадок.
4. Убедитесь, что указатель ручки регулировки интенсивности находится в положении "OFF". Убедитесь, что стеклянная насадка, корпус и изоляция провода не повреждены. Если они были повреждены, не используйте прибор.
5. Если трубка стеклянной насадки не излучает свет при первом включении устройства – это относится к нормальным явлениям. Она загорится в течение 1 минуты после включения.
6. Пожалуйста, снимите все металлические украшения и предметы. Убедитесь, что пользователи не контактируют с заземляющим проводом или другими людьми, поскольку электрический ток проводится по всему телу.
7. Кожа и одежда должны быть сухими. Если руки пользователя сильно потеют, ему следует надеть перчатки во время работы или использовать ткань, чтобы закрыть ручку устройства.
8. Не прикасайтесь к основанию насадки и не выдёргивайте ее из ручки, когда аппарат включен.
9. Интенсивность должна быть медленно отрегулирована в соответствии с адаптируемостью пользователя от низкой до высокой.
10. При использовании аппарата в течение 15 минут необходимо выключить его и сделать паузу 10-15 минут.
11. Не использовать на влажной коже.
12. Внимание! Необходимо перевести ручку регулировки интенсивности в положение "OFF" перед заменой насадки.
13. Запрещается погружаться в любую жидкость во время использования аппарата.
14. Хорошо расчешите волосы и убедитесь, что они сухие, когда вы делаете процедуру на волосистой части головы. Запрещено использовать на влажных волосах.
15. Не прикасайтесь к ушной раковине во время использования, чтобы не получить ожог.
16. Храните устройство в недоступном для детей месте.
17. После работы очистите корпус аппарата и поверхность стеклянной насадки мягкой влажной тканью. Используйте нейтральное очищающее средство или спиртовой раствор после того, как электрод и корпус достаточно высохнут.
18. Аппарат должен быть вдали от прямых солнечных лучей, источников высокой температуры и влажности. Бережно храните стеклянные электроды.

Техника проведения процедуры

Во время проведения процедуры кожа должна быть чистой и свободной от декоративной косметики, кремов и др. Поэтому перед процедурой рекомендуется провести тщательную очистку кожи.

Воздействие проводится медленными легкими движениями по основным массажным линиям лица и тела. Воздействие в режиме «тихого разряда» осуществляется контактным способом — без воздушного зазора между поверхностью насадки и кожей. При воздействии в таком режиме может возникать ощущение слабого, приятного тепла.

Воздействие в режиме «искрового разряда» осуществляется с воздушным зазором в 1–4 мм между поверхностью насадки и кожей. При воздействии в режиме «искрового разряда» ощущается покалывание, тихий треск, интенсивный запах озона. Можно заметить голубые искровые разряды, напоминающие тонкие маленькие молнии.

При воздействии на тело, для улучшения скольжения насадки по коже, перед процедурой ее присыпают тальком или детской присыпкой. При воздействии на лицо — косметическим тальком или пудрой. Для улучшения снабжения кожи кислородом можно проводить специальные процедуры по нанесенному на кожу кислородному гелю. Воздействие начинают с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая ее до необходимого значения. После завершения процедуры выключите аппарат вращением ручки регулятора интенсивности против часовой стрелки до щелчка и отключите от сети. Проведите обслуживание и уберите в футляр на хранение.

Процедуры на области лица и декольте

1. Проведите демакияж косметических средств при помощи молочка или тоника по типу Вашей кожи. При наличии акне и жирной кожи рекомендуется более глубокая очистка кожи скрабом или проведение пилинга специальными губками.
2. Удалите излишнюю влагу с кожи салфеткой и нанесите немного косметического талька для улучшения скольжения насадки (при наличии акне лучше использовать тальк с добавкой подсушивающих противовоспалительных компонентов).
3. Улучшение питания кожи. Воздействие проводится стеклянной насадкой «Грибок» и выполняется медленными скользящими движениями, направленными снизу вверх — от подбородка до мочки уха, от носа к вискам, от бровей вверх к волосистой части головы, т.е. в соответствии с основными массажными линиями. В области шеи движения проводятся по массажным линиям снизу-вверх, не затрагивая область щитовидной железы. Интенсивность воздействия: по методике «тихого разряда» со слабой или средней интенсивностью.
4. Для проблемной кожи используется насадка «Лепесток». Воздействие оказывается непосредственно на проблемную точку и медленными движениями на область вокруг нее. Интенсивность воздействия: – по методике «тихого разряда» (контактно) со средней интенсивностью. По методике «искрового разряда» с воздушным зазором 1–4 мм с высокой интенсивностью для оказания прижигающего действия.
5. После окончания процедуры рекомендуется нанести на лицо и шею питательный или увлажняющий крем по типу Вашей кожи, можно также провести ручной массаж лица или нанести питательную маску на 15–20 минут.
6. Процедуры проводятся ежедневно или через день. Общая продолжительность одной процедуры составляет 5–10 минут (увеличивать продолжительность следует постепенно). Продолжительность воздействия на область шеи — не более 5 минут. Один курс может включать от 10 процедур — для улучшения питания кожи, до 20 процедур — для проблемной кожи. Курсы можно повторять 3–4 раза в год.

